


ALFES-systemet

- for liten
- for stor

Få bevegelsen og friheten tilbake



ALFES-systemet benytter avansert MEMS sensorteknologi og intelligente algoritmer, som nøyaktig styrer tiden og varigheten av elektriske stimulering ved å spore svingvinkelen og bevegelsen av pasientens ben. ALFES-enheten leverer elektriske impulser til nervus peroneus communis (nervus peroneus superficialis & nervus peroneus profundus), som igjen aktiverer muskulatur som utfører bevegelsene dorsalfleksjon og eversjon av foten. De milde elektriske impulsene stimulerer nerven, slik at foten løftes i en passende rytme under gange. Det blir dermed mulig for pasienten å gå mer jevnt, naturlig og sikkert.

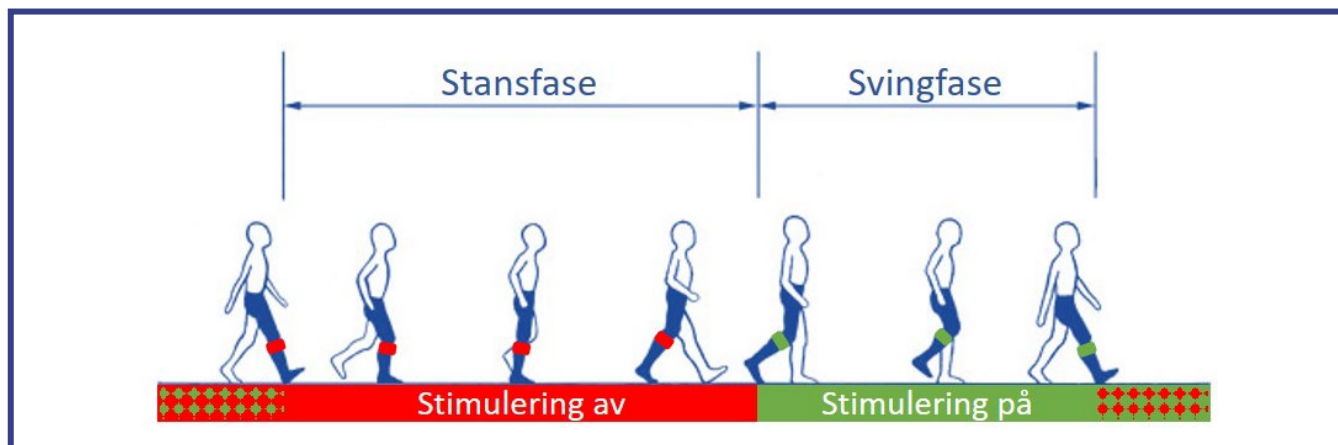

alfimed

Tlf: 31296886 faks: 31302118
www.alfimed.no
Epost: info@alfimed.no

Komponent-oversikt og artikkelnumre finnes på baksiden

ALFES Komponenter

Pasient-kit



Slimline System

Voksen Venstre
Art.nr. 933201000
Voksen Høyre
Art.nr. 933202000
Barn Venstre
Art nr. 933101000
Barn Høyre
Art.nr. 933102000

Deler pasient-kit



Slimline Cuff

Voksen Venstre
Art.nr. 931301000
Voksen Høyre
Art.nr. 931302000
Barn Venstre
Art nr. 931101000
Barn Høyre
Art.nr. 931102000



Stim-enhet

Venstre
Art.nr. 933100000
Høyre
Art.nr. 933200000



Fjernkontroll

Art.nr. 933300000



Contact Gel

Art.nr. 931200500

Test-kit



Quick Fit System

Voksen Venstre
Art.nr. 932001002
Voksen Høyre
Art.nr. 932002002
*Kontakt oss for info om
test-kit til barn*

Deler test-kit



Quick Fit Cuff

Voksen venstre
Art.nr. 931001000
Voksen høyre
Art.nr. 931002000



Quick Fit Pad

Voksen Venstre
Art.nr. 931201000
Voksen Høyre
Art.nr. 931202000



Nervestimulator

Art.nr. 932332000



Koffert

Art.nr. 932331000



Ladekabel USB

Art.nr. 932330000



Magnet-ladekabel m/2 plugger

Art.nr. 866300000



Adapter (uten kabel)

Art.nr. 932300000

Bestillinger kan gjerne sendes på e-post til: lager@alfimed.no