

alfimed

POINT DESIGNS

Robuste fingerproteser





Innhold

4-6	Point Digit, Digit Mini
8-9	Point Partial
10	Point Thumb
11	Point Endo
12-13	Point Pivot +

POINT DIGIT & POINT DIGIT MINI

Point Digit er en mekanisk, passiv og robust fingerprotese med bevegelige ledd.

Point Digit er en robust, passiv og leddet fingerprotese, designet for både styrke og lav vekt. Den har en innovativ sperremekanisme som låser seg i 11 ulike bøyevinkler, noe som gir brukeren økt allsidighet og kontroll. Utviklet av Point Designs, er disse protese-fingrene ideelle for personer som har mistet en finger og som trenger en slitesterk enhet som muliggjør enhandsbruk og justerbare bøyevinkler.

Protesen er laget av titan og rustfritt stål, og inkluderer alt nødvendig utstyr for sømløs integrasjon i en protesehylse. Point Designs fingerproteser produseres i lettvekts titan med delvis hul konstruksjon, ved hjelp av en avansert direkte metall-lasersintrings-prosess (DMLS). Denne moderne produksjonsmetoden sikrer styrke, presisjon og holdbarhet.



Produktfunksjoner

- Opptil 11 låsbare bøyevinkler.
- Høy styrke: Tåler belastning på opptil 150 lb (68 kg). Lav vekt: 20 g – 36 g (0,71 oz – 1,3 oz), avhengig av lengde.
- Anatomisk rotasjon rundt pasientens MCP-ledd.
- Kan betjenes med en hånd



Art.nr.	Modell	Lengde
914028080	Point Digit	80 mm
914028085	Point Digit	85 mm
914028090	Point Digit	90 mm
914028095	Point Digit	95 mm
914028100	Point Digit	100 mm
914028105	Point Digit	105 mm
914128000	Monteringssett, høyre hånd	-
914088000	Monteringssett, venstre hånd	-
914018900	1 års utvidet garanti Point Digit	-

Art.nr.	Modell	Lengde
914018900	1 års utvidet garanti – Point Digit Mini	-
914018055	Point Digit Mini	55 mm
914018060	Point Digit Mini	60 mm
914018065	Point Digit Mini	65 mm
914018070	Point Digit Mini	70 mm
914018075	Point Digit Mini	75 mm
914088000	Monteringssett, venstre hånd	-
914128000	Monteringssett, høyre hånd	-

POINT DIGIT & POINT DIGIT MINI

Titan-konstruksjon
Belastningskapasitet: 68 kg
(150 lb)

Rotasjonssenter
ved MCP-leddet


Frigjøringsknapp og
automatisk fjærretur

Bøymekanisme med sperrefunksjon

Anatomisk
fleksjon


Monteringssett

Torx©-festeskruer

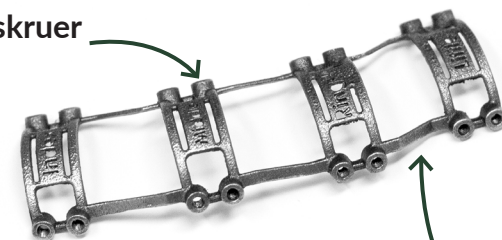

Konstruksjon i stål

Inkluderer
lamineringsskiver

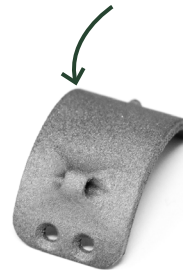

Breakaway-design for montering
av 1-4 fingre

Point Digit finnes i 6 lengder
Point Digit Mini finnes i 5 lengder



POINT PARTIAL

Point Partial – Lett, slitesterk og fleksibel fingerprotese

Point Partial er en mekanisk, passivt leddet fingerprotese, utviklet for å være både lett og kraftig. En ny patentert sperremekanisme låser protesen i sju unike bøyeinkler.

Finnes i tre lengder: 45, 50 og 55 mm, målt fra midten av PIP-leddet til fingertuppen. Lav vekt, 15–20 g avhenger av lengde. Laget av titan og rustfritt stål. Fingertuppen er kompatibel med touchskjermer.


Monteringssett for integrering i protese bestilles separat.

Point Partial er utviklet for personer med delvis fingeramputasjon som trenger en slitesterk løsning med enhåndsbetjening og flere bøyeinkler.




Produktfunksjoner

- Patentert sperremekanisme låser fingeren i syv unike bøyeinkler.
- Veier kun 15–20 g, laget av titan og rustfritt stål.
- Fingertuppen er designet for sømløs bruk med berøringsskjermer.
- Finnes i tre lengder (45, 50 og 55 mm) for optimal komfort og funksjon.

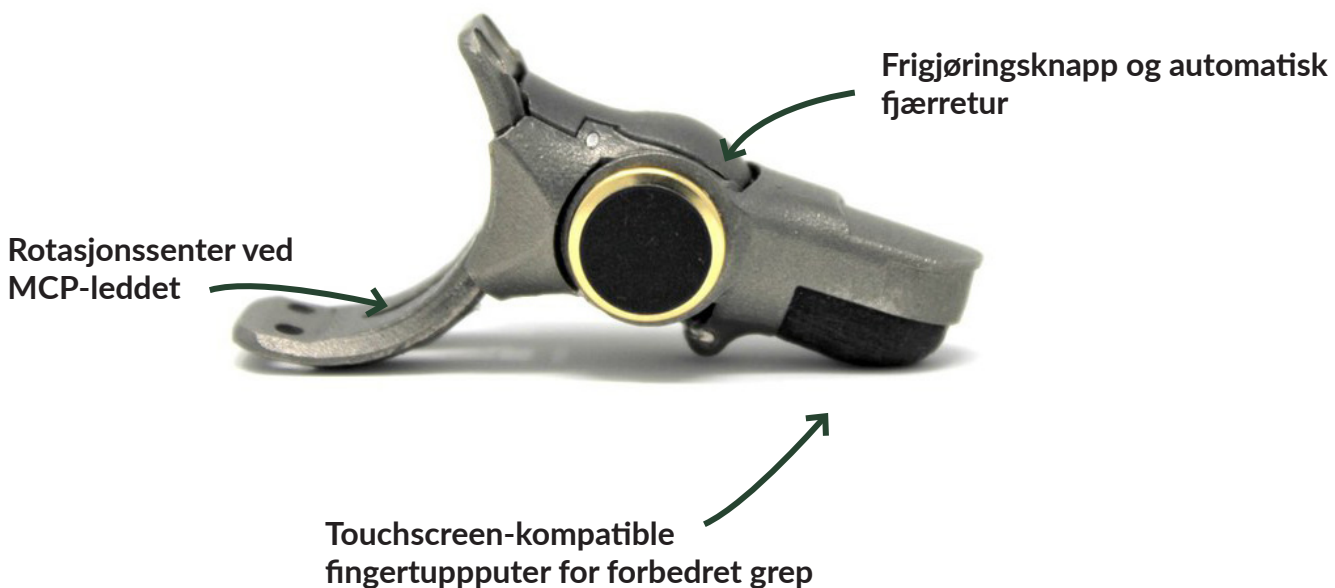

Monteringssett

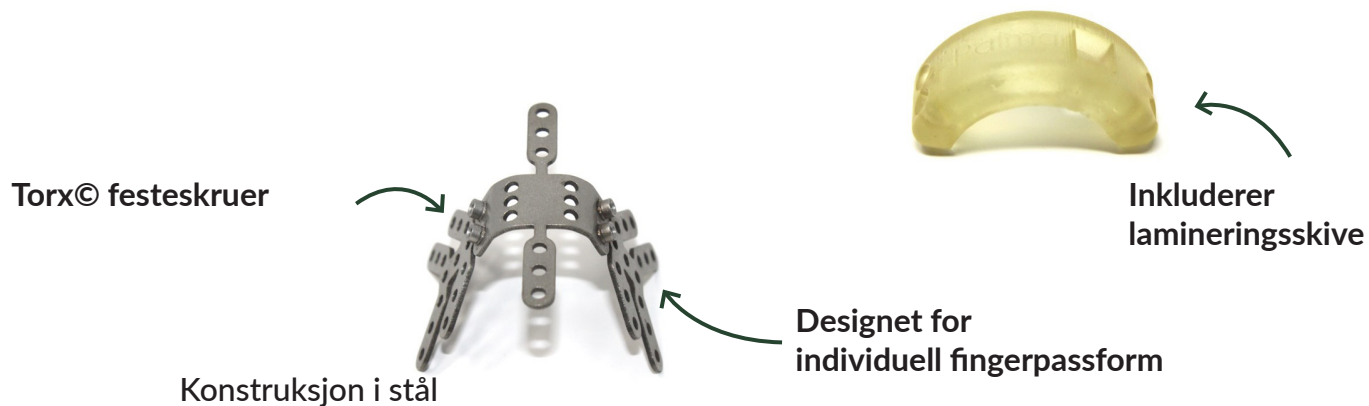

Art.nr.	Modell	Lengde
914029045	Point Partial	45 mm
914029050	Point Partial	50 mm
914029055	Point Partial	55 mm
914027045	Monteringssett for Point Partial 45 mm	-
914027050	Monteringssett for Point Partial 50 mm	-
914027055	Monteringssett for Point Partial 55 mm	-
914029000	1 års utvidet garanti – Point Partial	-

POINT THUMB

Adaptiv Styrke: Point Thumb En slitesterk og justerbar tommelprotese

Point Thumb er en mekanisk og passivt leddet tommelprotese, utviklet med en kombinasjon av lav vekt og høy styrke. Den benytter en ny patentert sperremekanisme som kan låses i 11 forskjellige bøyeinkler.

Denne tommelprotesen er utviklet for pasienter med tommelamputasjon, og som trenger en slitesterk enhet med enhåndsbetjening og justerbare bøyeinkler.

Finnes i tre lengder: 59, 66 og 73 mm, målt fra midten av MCP-leddet til fingertuppen. Lav vekt, 28–38 g avhengig av lengde.

Protesen er laget av titan og rustfritt stål. 2 års garanti med mulighet for forlengelse opptil maksimalt 5 år. Monteringssett for integrering i protese bestilles separat.



Art.nr.	Modell	Lengde
914018059	Point Thumb	59 mm
914018066	Point Thumb	66 mm
914018073	Point Thumb	73 mm
914089059	Monteringssett for Point Thumb 59 mm	-
914089066	Monteringssett for Point Thumb 66 mm	-
914089073	Monteringssett for Point Thumb 73 mm	-
914019000	Point Thumb Monteringssett	-

POINT ENDO

En toleddet mekanisk fingerprotese.
Utviklet for integrasjon i silikonkosmetikk

Point Endo er en toleddet mekanisk fingerprotese som er spesifikt designet for å integrasjon i silikonkosmetikk. Den er beregnet for lett til moderat belastning, og har en smal profil med en glatt ytre overflate. Finnes i 4 lengder. Belastningskapasitet på 68 kg. Laget av titan.

Monteringssett for integrering i protese bestilles separat.



Art.nr.	Modell	Lengde
914518080	Point Endo	80 mm
914518085	Point Endo	85 mm
914518090	Point Endo	90 mm
914518095	Point Endo	95 mm
914518901	Monteringssett Point Endo, Venstre	-
914518902	Monteringssett Point Endo, Høyre	-
914519000	1 års utvidet garanti – Point Endo	-

POINT PIVOT+

Ett dynamisk monteringssett for bedre funksjon i Point Thumb

Point Pivot+ er et dynamisk monterings-system som muliggjør flere bevegelsesgrader i Point Thumb. Som en erstatning for standard monteringsystem for Point Thumb, tilbyr Point Pivot+ mange funksjonelle fordeler for brukeren. Monteringssystemet gjør det mulig for Point Thumb bevege seg fra opposisjon til lateral posisjon. I tillegg muliggjør det rotasjon av fleksjons-/ekstensjonsplanet på Point Thumb, noe som gir et større spekter av funksjonelle grep.


2 års garanti, med mulighet for forlengelse opptil maksimalt 5 år.




Produktfunksjoner

- Lar Point Thumb bevege seg fra opposisjon til lateral posisjon.
- Muliggjør rotasjon av fleksjons-/forlengelsesplanet, og gir et større spekter av funksjonelle grep.
- Gir flere bevegelsesgrader for forbedret funksjonalitet og komfort.
- Leveres med 2 års garanti, med mulighet for forlengelse opptil 5 år for økt pålitelighet.

ADDUKSJON/ABDUKSJON

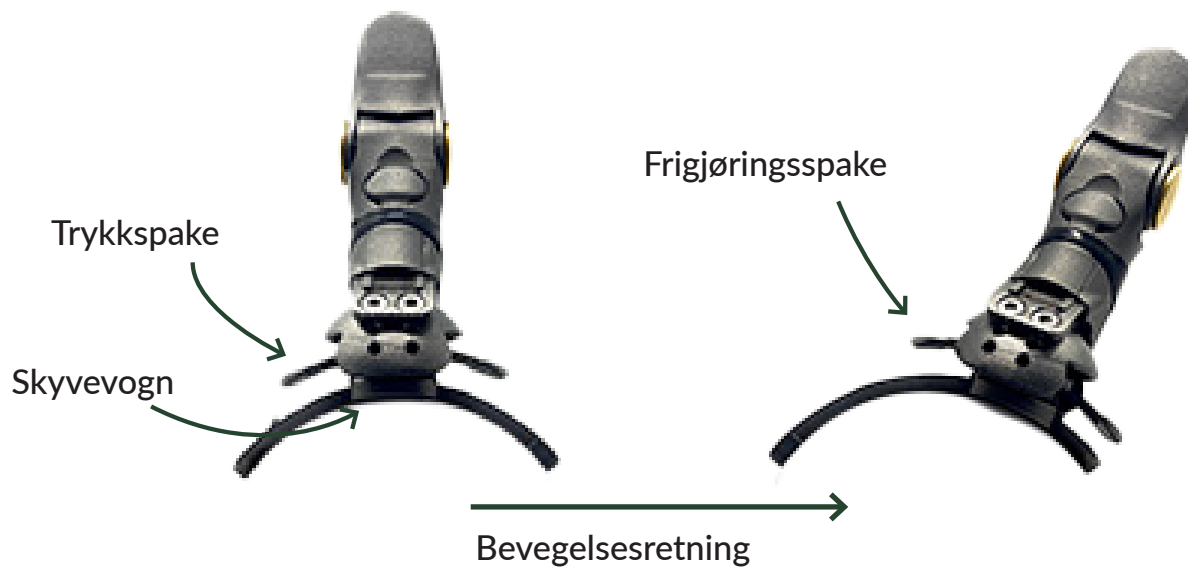

ROTASJON

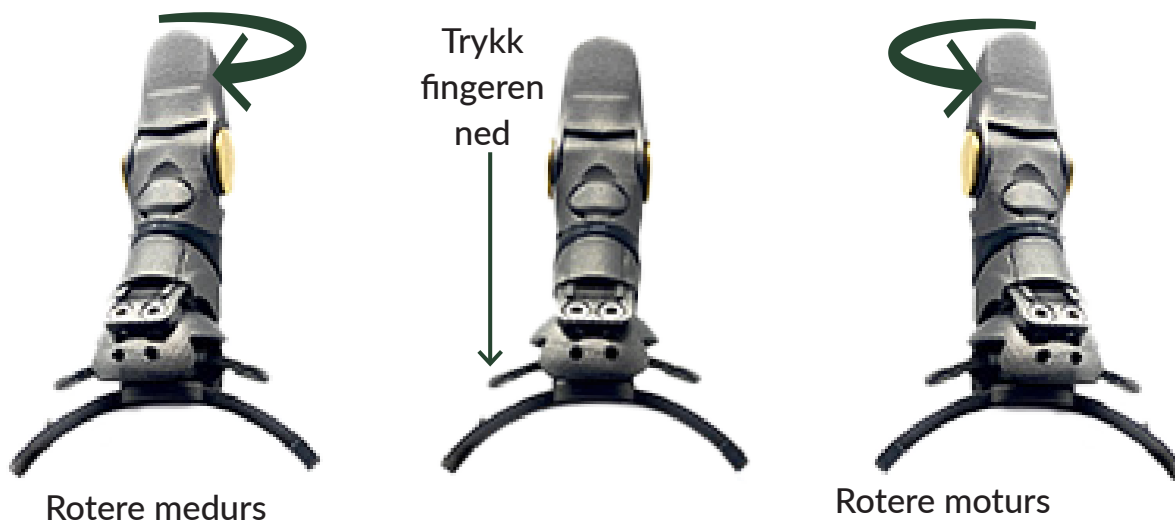

Art.nr.	Modell
914520000	Point Pivot+
914520100	Point Pivot+ Monteringssett
914529000	1 års utvidet garanti – Point Pivot+



alfimed

Alfimed AS, Olav Brunborgs vei 6, 1396 Billingstad, Norge, 31 29 68 86 info@alfimed.no