


Point Endo

alfimed

Produktoversikt

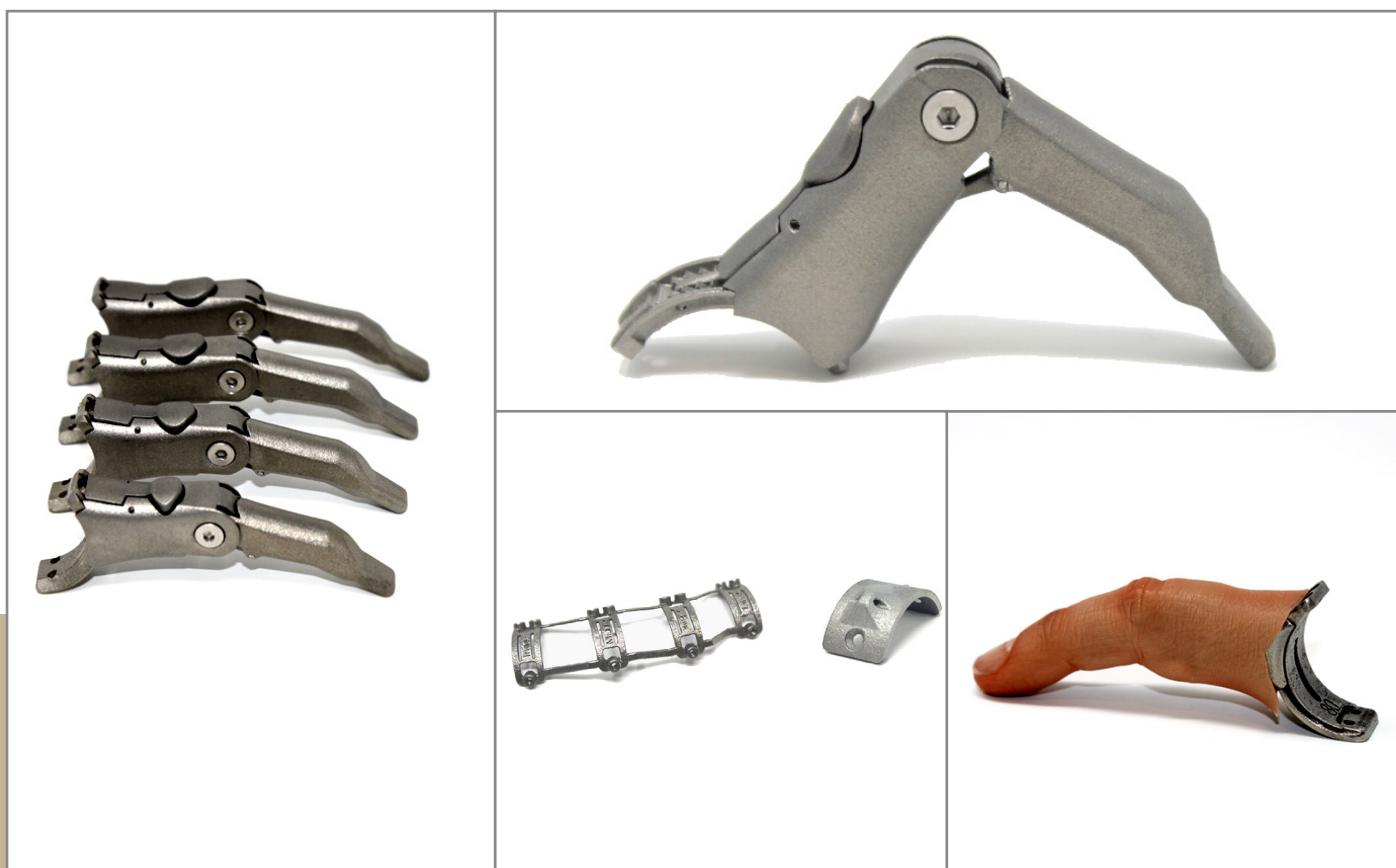

Oversikt

Point Endo er laget av delherdet titan, som gir en optimal kombinasjon av styrke og lav vekt – hver protese veier mellom 20 og 25 gram, avhengig av lengde. Den finnes i fire standardlengder (80, 85, 90 og 95 mm) og er spesielt tilpasset personer med delvis fingeramputasjon ved eller nær MCP-leddet. Hver finger tåler en belastning på opptil 68 kg, noe som gjør den til et pålitelig valg både i hverdagen og på jobb.

Produktfunksjoner

- Enhåndsjustering – Protesen kan justeres med én hånd for enkel bruk i hverdagen.
- Naturlig bevegelse – Bøying og rotasjon rundt MCP-leddet gir bedre funksjonalitet.
- Lett og sterk – Robust konstruksjon med lav vekt for komfortabel bruk.
- Kosmetisk integrering – Designet for enkel integrasjon med et kosmetisk silikonbelegg.

Point Endo – Fullstendig fingerprotese for kosmetisk integrasjon

Point Endo er en toleddet passiv fingerprotese, spesielt utviklet for integrasjon med et kosmetisk silikonbelegg. Den er designet for lett til middels tung bruk, med smal profil og glatt overflate uten gripestruktur eller konturer.

Protesen er laget av moderat herdet titan ved hjelp av direkte metall-lasersintring, som gir en lett, men sterk konstruksjon. Den patenterte låsemekanismen muliggjør låsing i ni ulike bøyningsposisjoner og kan enkelt justeres med én hånd.



Art.nr.	Modell	Lengde
914518080	Point Endo	80 mm
914518085	Point Endo	85 mm
914518090	Point Endo	90 mm
914518095	Point Endo	95 mm
914518901	Point Endo Left Mounting Kit	
914518902	Point Endo Right Mounting Kit	
914519000	Point Endo - 1 Year Extended Warranty	